



## Invacare Cestas de Transferência

#### Melhor posicionamento e facilidade de colocação

A nova gama de **cestas de transferência** proporciona soluções seguras e cómodas para as transferências e movimentos dos pacientes. Estas **cestas de transferência** foram desenvolvidas com a colaboração de Terapeutas Ocupacionais com o objectivo de servir perfeitamente os utilizadores oferecendo-lhes um óptimo apoio e de serem de fácil colocação pensando nas pessoas que os assistem. As cestas estão disponíveis em vários tamanhos e tipo de tecidos. As várias regulações possíveis de cada uma, permitem adaptarem-se da melhor forma às necessidades de cada utilizador.





## Cesta Invacare® Universal Conforto

O utilizador ficará numa posição ligeiramente reclinada e cómoda já que esta cesta oferece uma excelente sustentação tanto do corpo como da cabeça.

A **Cesta Universal Conforto** está destinada para utilizadores que têm um controlo limitado da cabeça, tronco, ou ancas sobretudo para transferências desde ou para uma posição deitada. Pode ser utilizada para transferências na posição sentada.

Esta cesta também pode ser utilizada sem o apoio de cabeça, removendo simplesmente as varetas plásticas que suportam o apoio de cabeça.

Tamanhos	Α	В	С	D
S	1080	840	730	380
М	1420	1000	830	400
L	1550	1100	920	510
XL	1680	1150	920	550

	Códigos/Tipo de tecido		
Tamanhos	Rede	Espesso	Conforto
s		1483777	1485956
M	1485952	1483778	1485957*
L	1485953	1483779	1485958*
XL		1485949	



1510

М

950

930

450

# Cesta Invacare® Standard com apoio de cabeça

O utilizador ficará numa posição ligeiramente reclinada e cómoda já que esta cesta sustenta o corpo e a cabeça.

A **Cesta Standard com apoio** de cabeça permite aos utilizadores manter os braços livres durante a transferência. Está destinada para utilizadores que têm um controlo limitado da cabeça, tronco, ou ancas sobretudo para transferências desde ou para uma posição deitada. Este modelo tem na zona das costas uma parte reforçada para assegurar uma maior distribuição do peso e comodidade do utilizador.

	Códigos/Tipo de tecido		
Tamanhos	Rede	Espesso	Conforto
M		1485961*	



## **Cesta** Invacare® **Standard**

Esta cesta sustenta todo o corpo incluindo os ombros, deve ser utilizada para pacientes que tenham controlo da cabeça. A **Cesta Standard** pode ser utilizada em transferências para ou desde a posição sentada, sendo muito fácil a sua colocação. Este modelo tem na zona das costas uma parte reforçada para assegurar uma maior distribuição do peso e comodidade do utilizador.

Tamanhos	Α	В	С	D
S	1000	920	510	410
M	1090	1050	560	480
L	1180	1090	580	560
XL	1240	1250	585	710

	Códigos/Tipo de tecido		
Tamanhos	Rede	Espesso	
s		1485882	
М	1478412	1485883*	
L		1485884*	
XL		1485885	



## Cesta Invacare® Hamac Conforto de fácil colocação

Esta cesta sustenta todo o corpo e cabeça. Caracteriza-se pela sua fácil colocação graças ao facto de apoiar as pernas separadamente uma da outra. Permite ainda uma óptima posição das ancas e assim uma posição sentada elevada. Esta cesta é também adequada para pacientes amputados. É muito fácil de usar tanto para transferências na posição deitada ou sentada.

Tamanhos	Α	В	С	D
S	1130	760	640	180
М	1200	800	675	190
L	1270	860	720	210

	Códigos/Tipo de tecido		
Tamanhos	Espesso	Conforto	
S	1451102		
М	1451103	1451108*	
L	1451104	1451109*	



**Tamanhos** 

### **Cesta** Invacare® **Toilette**

Dentro da nova gama de cestas *Invacare*®, esta oferece, graças ao cinto incorporado, uma excelente sustentação de todo o corpo e uma posição mais segura. A **Cesta Toilette** foi desenhada para aqueles utilizadores que têm uma mobilidade limitada. Permite ainda vestir e despir os utilizadores aquando da transferência. É utilizada para transferências desde e para uma posição sentada. É caracterizada por ser de fácil aplicação.


	Códigos/Tipo de tecido		
Tamanhos	<b>Espesso</b> Sem apoio de cabeça	<b>Espesso</b> Com apoio de cabeça	
S	1478440		
М	1478441*	1478445	
L	1478442*	1478446	

## Cesta Invacare® Hamac Conforto e Cesta Invacare® Hamac Conforto com rasgo


Estas cestas sustentam todo o corpo e cabeça. A **Cesta** Invacare® **Hamac Conforto e Conforto com rasgo** são ideais para utilizadores que têm dores crónicas. São também muito úteis para amputados e para utilizadores que têm, devido as posições incomodas, dores especificas e preferem assim permanecer sentados. A **Cesta Hamac Conforto** é colocada no utilizador na posição deitada e durante a transferência o utilizador ficará na posição sentada. A **Cesta Hamac Conforto** com rasgo facilita a higiene intima do utilizador.

	Códigos/Tipo de tecido			
	Hamac Conforto		Hamac Confo	rto com rasgo
Tamanhos	Rede	Conforto	Rede	Espesso
S		1485554	1451097	1451092
M	1485969	1485777*	1451098*	1451093
L		1485778	1451099	1451094
XL				1451095



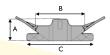

Tamanhos	Α	В	С
М	330	895	1170
L	360	950	1270

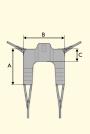



Cestas Invacare® para Elevador Reliant 350
Transferência posição levantada
Transferência posição sentada

- Fáceis de instalar
- Cestas sob axilares forradas para maior conforto
- Cinto de regulação para cintura com fecho
- Estrutura anti derrapante nas costas para maior apoio da cesta
- Cestas aconselhadas para utentes com boa postura do tronco
- Adaptadas para transferências na posição sentada / levantada

	Cesta para transf. sentada	Cesta para transf. de pé	
Tamanhos	Rede	Rede	
М	1484686	1484690	
L	1484687	1484691	

Tamanhos	Α	В	С
M	1020	895	260
L	1180	950	330

#### Tipo de tecidos



Espesso
Menos flexível, de fácil de
manuseamento e em simultâneo
muito agradável para o utilizador.
Seca rapidamente após lavagem.



Para o banho ou indicada quando o utilizador permanece sentado na cesta por muito pouco tempo.



Tecido ligeiramente elástico que se adapta à morfologia do utente. Ideal para utilizadores com problemas de pele.









Todas as cestas devem ser testadas e ajustadas para assegurar a comodidade e segurança do utilizador durante as transferências.

\* Disponíveis em stock, salvo ruptura.

Algumas cestas com tamanho ou tipo de tecido descritas no catalogo necessitam de encomenda especial. O prazo de entrega será mais demorado.

É importante que seja feita uma análise de risco no que diz respeito à pele dos utilizadores para aqueles que têm que ficar durante muito tempo sentados na cesta. Medidas facultadas em mm

#### Escolha do tamanho

