

# Stabimed®

Joelheira funcional e macia com limitação de extensão/flexão, feita em material Airtex medi

## Indicações

- instabilidade ligeira a moderada da articulação do joelho
- lesões no menisco
- alterações traumáticas ou degenerativas da articulação do joelho
- como protecção nas fases posteriores à reabilitação

## Modo de acção

- estabilização colateral da articulação do joelho graças às barras laterais
- prevenção de hiperextensão e limitação da gama de movimentos graças às articulações Physioglide
- joelheira macia com efeito de compressão e proprioceptivo


## Características

- articulações Physioglide policêntricas com base no princípio da ligação em 4 pontos
- excelente conformidade graças à versão envolvente com fecho em velcro à frente e material de rede persistente atrás
- feita em material Airtex medi, respirável e que afasta a humidade
- utilização sem problemas em desportos de contacto
- limitação da extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- limitação da flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°




atrás (material de rede)


## Vantagens do produto

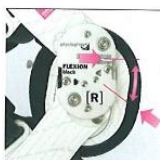

**Articulação Physioglide**  
Um design de articulação policêntrico único que imita na perfeição o movimento de rodar e deslizar do joelho.

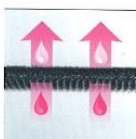

medi airtex

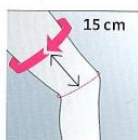

## Stabimed

tamanho	circunferência cm	número do artigo
XS	31 - 37	G.070.021
S	37 - 45	G.070.022
M	45 - 51	G.070.023
L	51 - 57	G.070.024
XL	57 - 65	G.070.025
XXL	65 - 74	G.070.026

medição: circunferência da coxa 15 cm acima do centro da rótula (medido no lado medial da coxa)