

M.3® OA

Joelheira funcional para osteoartrite

Indicações

- tratamento conservativo de osteoartrite unilateral, medial ou lateral pronunciada
- cuidados permanentes sempre que a cirurgia for contra-indicada
- cuidados temporários até ser tomada a decisão quanto a possíveis procedimentos cirúrgicos, tais como osteotomia de correcção ou substituição da articulação do joelho
- para alívio do suporte de peso após cirurgia de fracturas mediais ou laterais da cabeça tibial

Modo de acção

- correcção do espaço da articulação lateral ou medial através do princípio de 3 pontos
- alívio de dor reduzindo o suporte de peso no lado afectado da articulação
- reduz maior irritação capsular/sinovite


Características

- ângulos varus e valgus ajustáveis individualmente com uma articulação de perfil baixo; durante o tratamento, os ângulos varo/valgo podem ser reajustados de acordo com o processo de cura
- as almofadas condilianas pneumáticas para maior distribuição de pressão complementam a articulação (utilizando a bomba manual fornecida)
- construção muito leve e fácil de colocar
- limitação da extensão 0°, 10°
- estrutura feita com o novo alumínio Avional




frente

Vantagens do produto

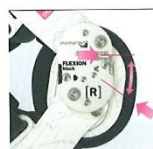

Articulação Physioglide
Um design de articulação policêntrico único que imita na perfeição o movimento de rodar e deslizar do joelho.

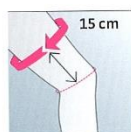

M.3 OA

tamanho	circunferência cm	número do artigo varo esq./valgo dir.	número do artigo valgo esq./varo dir.
XS	31 – 37	5.5F3.041	5.5F3.051
S	37 – 45	5.5F3.042	5.5F3.052
M	45 – 51	5.5F3.043	5.5F3.053
L	51 – 57	5.5F3.044	5.5F3.054
XL	57 – 65	5.5F3.045	5.5F3.055
XXL	65 – 74	5.5F3.046	5.5F3.056

medição: circunferência da coxa 15 cm acima do centro da rótula
(medido no lado medial da coxa)