

protect.4 OA

Joelheira para osteoartrite de 3 pontos para alívio da pressão varo/valgo.

Indicações

- tratamento conservativo de osteoartrite unilateral avançada ou de instabilidade complexa de ligamentos, especialmente em combinação com osteoartrite unilateral
- alívio da pressão pós-operatória e protecção por compartimentos após fracturas da cabeça da tibia, cirurgia à cartilagem, refixação do menisco, osteotomia de correcção
- instabilidade dos ligamentos cruzados com alívio da pressão do compartimento medial ou lateral
- para tratamento pré ou pós-operatório funcional de instabilidades do joelho

Descrição


- Joelheira rígida de 4 pontos, para o controlo da translação anterior e posterior da tibia. Protecção, estabilização, alívio da dor e restauração da mobilidade por meio de:
- alívio da pressão do compartimento medial ou lateral da articulação através do princípio dos 3 pontos que descomprime o compartimento afectado para uma posição varo ou valgo
- estabilização da articulação do joelho através do princípio dos 4 pontos para neutralizar a instabilidade do joelho que causa frequentemente osteoartrite
- protege contra hiperextensão e oferece limitação de flexão e extensão

Características

- pressão varo ou valgo exacta e eficaz exercida junto da articulação do joelho
- almofadas com estrutura larga e bem acolchoada para o sistema de 3 pontos de alívio da pressão
- design maleável da estrutura para redução de forças de torção
- construção ultra plana, muito leve e não saliente da articulação e da estrutura
- alívio da pressão do compartimento medial ou lateral da articulação através do princípio dos 3 pontos que descomprime o joelho para uma posição varo ou valgo
- estabilização do joelho através do princípio dos 4 pontos para neutralizar a instabilidade do joelho que causa frequentemente osteoartrite
- limitação da extensão:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- limitação da flexão:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°
- imobilização 0°, 20°, 30°, 45°
- forro disponível mediante pedido



sistema de decompressão

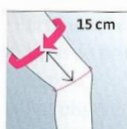

medição
circunferência da coxa 15 cm acima
do centro da rótula (medida no lado
medial da coxa)

protect.4 OA

tamanho	cm	número do artigo		número do artigo	
		varo esq.	varo dir.	valgo esq.	valgo dir.
xs	31 – 37	G.645.201	G.645.301	G.646.201	G.646.301
s	37 – 45	G.645.202	G.645.302	G.646.202	G.646.302
m	45 – 51	G.645.203	G.645.303	G.646.203	G.646.303
l	51 – 57	G.645.204	G.645.304	G.646.204	G.646.304
xl	57 – 65	G.645.205	G.645.305	G.646.205	G.646.305
xxl	65 – 74	G.645.206	G.645.306	G.646.206	G.646.306